${\bf Anfängerpraktikum~V303}$

Lock-In-Verstärker

Helena Nawrath helena.nawrath@tu-dortmund.de

Carl Arne Thomann arnethomann@me.com

Durchführung: 2. Dezember 2014

Abgabe: 9. Dezember 2014

TU Dortmund – Fakultät Physik

1 Zielsetzung

Versuchsziel ist es, sich mit der Funktionsweise des Lock-In-Verstärkers vertraut zu machen. Außerdem soll für 10 verschiedene Phasen mit und ohne verrauschtes Signal die Funktionsweise verifiziert werden. Zuletzt soll die Rauschunterdrückung mit einer Photodetektorschaltung überprüft werden.

2 Theorie

Lock-In-Verstärker werden eingesetzt, um Signale mit hohem Rauschen zu messen. Im Gegensatz zum Bandpass kann hier auch Rauschen herausgefiltert werden, welches auf der selben Frequenz wie das Messsignal liegt.

Das zu messende Eingangssignal U_{sig} durchläuft im Gerät verschiedene Bauelemente.

Nach der Verstärkung durch den Pre-Amplifier durchläuft das Signal zunächst einen Bandpassfilter, der das Rauschen minimiert. Alle Frequenzen ω . die nicht der Referenzfrequenz ω_0 entsprechen werden grob herausgefiltert. Ein Detektor erzeugt die Referenzspannung $U_{\rm ref}$ - eine Sinus- oder Rechteckspannung - der Frequenz ω_0 , welche über den Phasenschieber an die Phase des Eingangssignals angepasst wird. Dieser Vorgang nennt sich Synchronisation. Im Mischer treffen beide Signale aufeinander, werden multipliziert und anschließend an den Tiefpass weitergeleitet. Der Tiefpass funktioniert als Integrierer. Die Modulationsfrequenz ω_0 wird über mehrere Perioden integriert um restliche Rauschanteile auszuschließen. Zurück bleiben nur die Anteile der Signalsspannung $U_{\rm sig}$, die mit der Referenzspannung synchronisiert werden konnten.

Um eine möglichst geringe Bandbreite $\Delta \nu = \frac{1}{\pi RC}$ zu erhalten, sollte die Zeitkonstante $\tau = RC$ ausreichend groß gewählt werden. Damit wird eine hohe Güteziffer erzielt.

Die Ausgangsspannung $U_{\rm out}$ ist proportional zur Eingangsspannung und zum COSINUS . Je größer die Phasendifferenz zwischen Signal- und Referenzspannung ist, desto geringer ist die Ausgangsspannung. $U_{\rm out}$ wird also maximal, wenn die Phasendifferenz $\Delta \Phi = 0$ beträgt. http://www.physik.uni-regensburg.de/studium/praktika/a2/download/versuch5a.pdf

3 Durchführung

Um mit dem Lock-In-Verstärker vertraut zu werden, werden vor eigentlichem Versuchsbeginn nacheinander die beiden Ausgänge des Funktionengenerators an das bereitstehende Oszilloskop geschlossen. Durch ausprobieren kann festgestellt werden, welches das zu messende Signal bzw. das Referenzsignal ist. Die Amplitude des Referenzsignals kann im Gegensatz zum Messsignal verändert werden; außerdem besteht die Möglichkeit zwischen Rechteck- und Sinusspannung zu wählen.

Im ersten Versuchsteil soll die Funktionsweise des Gerätes bestätigt werden. Dazu wird die in Abbildung X gezeigte Schaltung aufgebaut. Danach werden Frequenz und Amplitude des Mess- und Referenzsignals eingestellt. Mit dem Phasenschieber werden 10 unterschiedliche Phasen eingestellt und die Werte der Augangsspannung notiert.

Dieser Vorgang wird anschließend mit verrauschtem Sinussignal wiederholt. Dazu wird der vorher überbrückte Noise-Generator zugeschaltet.

Die in Abbildung Y skizzierte Schaltung wird im zweiten Versuchsteil aufgebaut. Es soll die Intensität des Lichtes in Abhängigkeit vom Abstand gemessen werden. Die sich auf einer Metallschiene befindliche LED soll mit einer Frequenz von 300 Hz blinken, was mit einer Rechteckspannung gleicher Frequenz realisiert wird. Durch verschieben der LED auf der Metallschiene kann die Ausgangsspannung am Lock-In-Verstärker abgelesen werden

4 Auswertung

4.1 Verstärkung eines gestörten Sinus-Signales

Die Amplitude bei Sinus-förmiger Wechselspannung ist an beiden Ausgängen $0\,\mathrm{V}$, die Frequenz f beträgt $1\,\mathrm{Hz}$. Die Spannungen, die der den Tiefpass und damit den gesamten

Phase	Ausgangsspannung in V		
	ohne Störung	mit Störung	
	-6,00	6,00	
45°	-4,00	4,00	
90°	$0,\!20$	-0,50	
120°	2,62	-3,00	
135°	$4,\!25$	-4,50	
180°	5,81	-6,00	
225°	$3,\!95$	$-3,\!50$	
270°	$0,\!20$	$0,\!50$	
315°	-4,17	$4,\!50$	
360°	-5,83	5,50	

Tabelle 1: Ausgangsspannung des gegebenen Signals.

Lock-In-Verstärker verlassen, sind in Tabelle 1 aufgetragen. Die angegebene Phase ist die eingestellte Phase des Phasenschiebers. Diese Spannungen werden in Diagramm 1 gegen die eingestellte Phase aufgetragen; es zeigt sich, dass die Beziehung (??) durch die Datenpunkte verifiziert wird, es aber zu einem festen Phasenversatz α von $\alpha = \pi$ kommt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass das Signal eventuell nicht exakt Sinus-förmig, sondern per se eine Phasenverschiebung aufweisen.

Bei dem Verfahren mit gestörtem Signal ist dieser Phasenversatz α nicht existent. Die Phasenverschiebung scheint bei dem gestörten Signal nicht aufzutreten. Das Diagramm 2 zeigt die Beziehung (??) deutlich.

4.2 Verstärkung des LED-Signales

Das Signal, das von der Photodiode aufgenommen wird, wandelt der Lock-In-Verstärker in eine reine negative Gleichspannung. Im Interesse der Lesbarkeit werden die negativen Spannung unter Berücksichtigung der Gesamt-Verstärkung in Diagramm 3 aufgetragen. Zur Kontrolle, dass die angegebenen Spannungen auf das LED-Signal zurückzuführen sind und nicht von Fremdeinflüssen stammen, wird die LED zeitweise abgedeckt. Dabei geht bei einer messbaren Signal die Ausgangsspannung auf Null zurück und nimmt ihren ursprünglichen Wert an, wenn der Lichtweg zwischen LED und Photodiode frei gemacht wird.

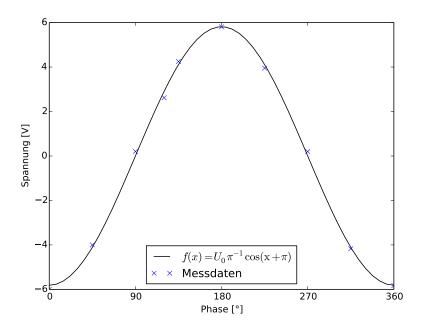


Abbildung 1: Ausgangsspannung des Lock-In-Verstärkers bei Sinus-förmigen Eingang mit $U=0\,\mathrm{V}$ und $f=300\,\mathrm{Hz}.$

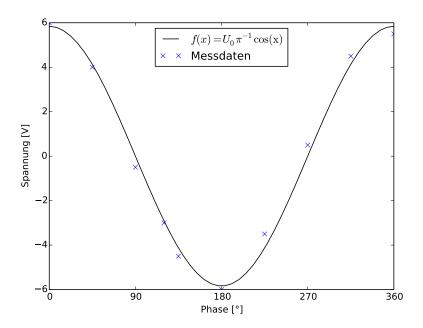


Abbildung 2: Ausgangsspannung des Lock-In-Verstärkers bei gestörtem Signal.

Abstand a	Ausgangsspannung	Gesamt-Verstärkung	
[m]	[V]	absolut	relativ
0.02	-5	$400 \cdot 5$	1
0.05	-1	$400 \cdot 5$	1
0.08	-0,5	$400 \cdot 5$	1
0.11	-2	$400\cdot 50$	10
0.14	-1	$400 \cdot 50$	10
0.17	-0.9	$400 \cdot 50$	10
0.20	-6,0	$400\cdot 500$	100
0.23	-4,5	$400\cdot 500$	100
0.26	-3,5	$400\cdot 500$	100
0.29	-2,5	$400\cdot 500$	100
0.39	-1,0	$400\cdot 500$	100
0.49	-0.7	$400\cdot 500$	100
0.59	-0,5	$400\cdot 500$	100
0.69	-0,3	$400\cdot 500$	100
0.79	$-0,\!25$	$400\cdot 500$	100
0.99	$-0,\!12$	$400\cdot 500$	100
1.19	-0,1	$400 \cdot 500$	100

Tabelle 2: Ausgangsspannung bei der Messung des LED-Lichtes.

Bei einem Abstand von etwa $1,20\,\mathrm{m}$ ist trotz Verstärkung keine Ausgangsspannung messbar, die Ausgangsspannung zeigt beim Abdecken der LED keine wesentliche Änderung.

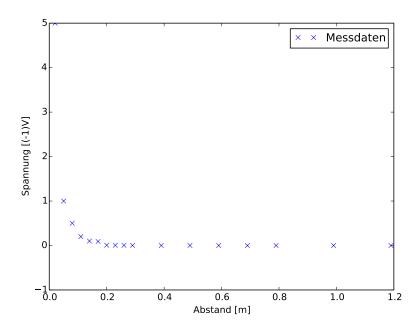


Abbildung 3: Ausgangsspannung des Lock-In-Verstärkers bei Messung mit der LED.

5 Diskussion

5.1 Ergebnis des Versuches

Der Lock-In-Verstärker eignet sich hervorragend zur Messung von schwachen und gestörten Signalen. Das Signal kann dabei Störungen aufweisen, die die Signalstärke um Größenordnungen übertreffen. Ist die Frequenz des zu messenden Signales bekannt, so kann es präzise von den Störungen gefiltert und verstärkt werden. Dies führt zu einem wesentlichen Unterschied zu reinen Bandpass-Filtern: im Vergleich zu diesen ist der Lock-In-Filter in der Lage, Signale mit variabler Frequenz zu verstärken. Dies folgt daraus, dass der Vorteil des Lock-In-Verstärkers darin besteht, über das Referenzsignal zu gegebener Zeit die gewünschte Frequenz zu filtern.

Im Versuch konnte das 300 Hz-Signal der LED über eine Strecke von etwa 1 m nachgewiesen werden, wobei keine speziellen Maßnahmen getroffen wurden, um Einflüsse durch Störlicht zu vermeiden. Die Intensität der LED war dabei nicht wesentlich größer als das Umgebnungslicht des Raumes.

5.2 Anwendung des Lock-In-Verstärkers

Anwendung findet der Lock-In-Verstärker beispielsweise in der Elektro- und Informationstechnik zur Übermittlung von Daten über langen Strecken. Bei der Messung von Signalen sollte im Idealfall die Frequenz des Signales bekannt sein, etwa bei amplitudenmodulierten Wellen.

Ein anderer Verwendungszweck ist die Bestimmung des Phasenversatzes von zwei Signalen. Nach Gleichung (??) ist die ausgegebene Gleichspannung maximal, wenn die Eingangssignales keinen Phasenversatz aufweisen. In Abschnitt 4.1 wird gezeigt, wie sich ein Phasenunterschied auf die resultierende Spannung auswirkt.

Literatur

- [1] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". In: Computing in Science and Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. URL: http://link.aip.org/link/?CSX/9/90/1. Version 1.3.1.
- [2] Eric Jones, Travis Oliphant, Pearu Peterson u. a. SciPy: Open source scientific tools for Python. 2001. URL: http://www.scipy.org/. Version 0.14.0.
- [3] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties.*URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/. Version 2.4.5.

- [4] Travis E. Oliphant. "Python for Scientific Computing". In: Computing in Science and Engineering 9.3 (2007), S. 10–20. URL: http://link.aip.org/link/?CSX/9/10/1. Version 1.8.1.
- [5] The GIMP Team. GIMP: GNU Image Manipulation Program. URL: http://www.gimp.org/. Version 2.8.10.

Die verwendeten Plots wurden mit matplotlib[1] und die Grafiken mit GIMP[5] erstellt sowie die Berechnungen mit Python-Numpy, [4], -Scipy[2] und -uncertainties[3] durchgeführt.